



Catálogo de acessórios

Série Ci7000, Série Ci60 e MetaVue VS3200



Índice

Série Ci7000	4
Líquidos	5
Pré-formas de plástico	6
Fibra, carpete, têxteis	6
Filmes finos	7
Peças grandes, pós ou grânulos	7
Materiais translúcidos	7
Acessórios complementares para instrumentos	7
Série Ci60	8
Líquidos com suporte para instrumentos	9
Latas impressas (Metal Deco)	9
Peças pequenas ou com formatos estranhos	10
Grânulos de plástico	10
Cartões de pagamento	10
Batons	10
Amostras em formato cilíndrico	11
MetaVue VS3200	12
Amostras grandes ou com formatos estranhos	13
Converta o instrumento para medir como uma bancada	13
Pós, líquidos, pastas e géis	14



Série Ci7000

Compatíveis com todos os modelos, os acessórios da série Ci7000 foram desenvolvidos para solucionar os desafios mais comuns de medição de dispositivos e cores.



Líquidos



Suporte para célula de fluxo contínuo

Permite a medição de líquidos alojados em uma célula cilíndrica.

Itens dependentes de CiA-800-01 ou CiA-800-02

Não compatível com: Ci75xx, Ci7630, Ci7830

Ci7-801



Suporte para cubeta de refletância

Permite a medição da refletância de amostras líquidas em cubetas.

CiA-803



Suporte para tubo de ensaio com borda branca

(abertura de 25 mm)

Permite a medição da refletância de amostras líquidas em tubos de ensaio.

Ci5-803



Suporte para tubos de ensaio de suco de laranja* e líquidos com borda preta

O suporte de tubo de ensaio integrado é fixado magneticamente na parte frontal do dispositivo para manter e medir suco de laranja e outros líquidos.

*Suco de laranja disponível somente em modelos aprovados.

423891



Suporte de célula líquida com borda preta

(abertura de 10 mm)

Permite a medição de líquidos com um suporte de cubeta.

CiA-807



Kit de suporte para tubos de ensaio com borda branca

(abertura de 28-30 mm)

Mede quantidades maiores de líquidos com um tubo de ensaio maior.

CiA-811

Pré-formas de plástico



Suporte de transmissão de pré-forma

Permite a medição da transmissão de amostras de pré-formas não opacas.

Não compatível com: Ci75xx, Ci7630, Ci7830

Itens dependentes de CiA-800-01 ou CiA-800-02

Ci7-802




Conjunto de suporte de pré-forma

Permite a medição de refletância relativa de amostras líquidas em cubetas.

CiA-802


Fibra, carpete, têxteis

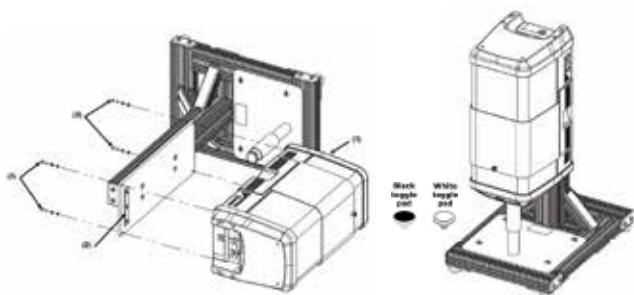

Suporte vertical com porta para baixo

Permite medições de refletância na vertical para apresentação e medição rápidas em amostras como jeans, tecidos e papel.

CiA-805

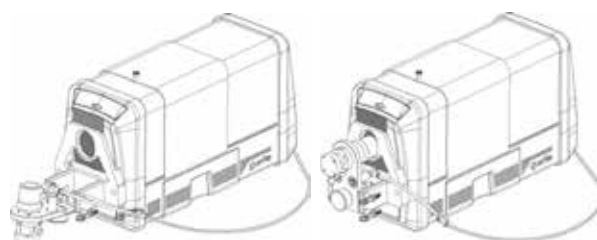

Braço de pressão Ci7x00

O conjunto pneumático permite a medição precisa de amostras com felpas.

Itens que dependem de SD146-01 ou A-AP/GLAV57

CiA-806



Vidro com abertura de 25 mm

Protege a esfera e evita danos acidentais.

A-AP/GLAV57



Cubeta de compressão de fibras

Permite a medição de fibras em cubetas.

SD146-01

Acessórios complementares para instrumentos



Kit de filtro de poeira

Impede a entrada de poeira e outros contaminantes presentes no ar do ambiente de trabalho, prejudicando o desempenho.

CiA-815



Subconjunto de alternância de braço de amostra

(cerâmica branca embutida)*

Ideal para medições de refletância que exigem um suporte branco, como tecidos, plásticos ou outras amostras menos opacas.

*Padrão no Ci78xx

GM29021020



Aberturas para a série Ci7000


Várias aberturas para maximizar a medição e o tamanho do ponto de amostra

Aberturas compatíveis disponíveis Ci76xx, Ci78xx, Ci75xx

- CiA-25-05, 3,5 mm*
- CiA-25-04, 6 mm*
- CiA-25-03, 10 mm
- CiA-25-02, 17 mm*
- CiA-25-01, 25 mm

*Fabricado depois de março de 2023

Peças grandes, pós ou grânulos

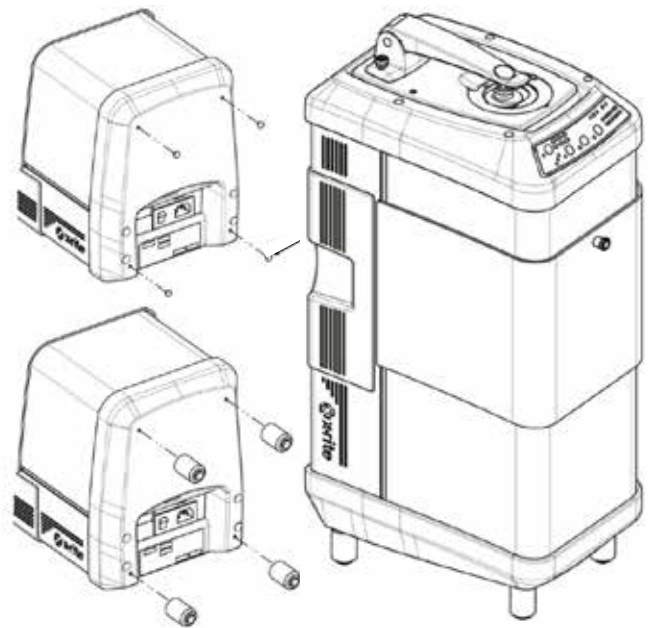

Kit de pés acessórios verticais

Permite que as medições sejam feitas verticalmente ou com a porta de medição voltada para cima.

CiA-801

Filmes finos

Suporte de amostras para transmissão

Auxilia na medição por transmissão direta e total de amostras não opacas, como filmes finos

Suporte de amostras para o Ci7600: CiA-800-02

Suporte de amostras para o Ci7800/Ci7860 CiA-800-01

Suporte difuso branco

Kit CIA-227

Não compatível com Ci75xx, Ci7630, Ci7830



Série Ci60

Compatíveis com todos os modelos, as peças e acessórios da série Ci60 foram desenvolvidos para solucionar os problemas mais comuns de instrumentos e medições.



Líquidos com suporte para instrumentos

Suporte portátil para instrumentos

Converte seu dispositivo portátil em uma posição de bancada para medição vertical ou horizontal do plano da amostra.

Compatível com as séries Ci6x e 96x

Ci62-801

Armadilha preta

Necessária para usar a série Ci60 no suporte de medição portátil

Itens dependentes do Ci62-801

Ci52-804



Suporte de célula para pó ou líquido - Porta para cima

Auxilia na medição de líquidos ou pós. Deve ser usado com o suporte de instrumento portátil para uma medição adequada.

Itens dependentes do Ci62-801

SP62-802



Suporte para célula de líquido - Porta para a frente

Auxilia na medição de líquidos. Deve ser usado com o suporte de instrumento portátil para uma medição adequada.

Itens dependentes do Ci62-801

SP62-803



Cartões de pagamento

Suporte para cartões de pagamento

Armazena cartões de pagamento como débito, crédito, etc. para medição de cores. Compatível com as séries Ci6x, 96x e eXact Ci62-804



Peças pequenas ou com formatos estranhos

Suporte universal de amostras

Garante a medição consistente e repetível da cor de objetos como estojos de cosméticos (batom e delineador), corpos de canetas e pequenos frascos moldados. O acessório também funciona bem para medir amostras de tecido que exigem várias dobras para atingir a opacidade. Compatível com as séries Ci6x e 96x DRS-803



Grânulos de plástico

Suporte para grânulos

Desliza sobre a sapata da série Ci60 para medir grânulos de plástico. Um êmbolo aplica pressão para segurar os grânulos durante a medição, e o suporte apresenta um reservatório de amostra que pode ser fechado para evitar derramamento. Compatível com as séries Ci6x e 96x DRS-801

Amostras em formato cilíndrico



Suporte para copo e cilindro

Segura copos e amostras de formato cilíndrico para medição com um espectrofotômetro portátil da X-Rite.

Compatível com as séries Ci6x, 96x e eXact

Ci62-803



Kit de bloco em V

Armazena peças pequenas e de formato estranho (0,5 pol./1,27 cm a 1,25 pol./3,175 cm redondas)

Compatível com as séries Ci6x e 96x

DRS-802



Batons

Suporte para batom

Fixa os batons em um suporte personalizado para medição de cores.

Compatível com as séries Ci6x e 96x

Ci62-802



Latas impressas (Metal Deco)

Suporte para latas

Armazena latas de bebidas de alumínio de tamanho padrão (2,6 pol./6,5 cm de diâmetro) para medição com um espectrofotômetro portátil da X-Rite.

Compatível com as séries Ci6x e 96x

DRS-800-026



MetaVue VS3200

Compatíveis com o MetaVue VS3200, essas peças e acessórios foram desenvolvidos para solucionar os desafios mais comuns de dispositivos e medições.



Amostras grandes ou com formatos estranhos

Suporte ajustável

Permite que o instrumento seja levantado e abaixado acima da superfície de trabalho para acomodar amostras com espessuras variadas.

VS3-800



VS3-810

Converta o instrumento para medir como uma bancada

Suporte de bancada

Converte o instrumento em um espectrofotômetro de bancada com um braço de amostra para manter as amostras planas e em posição. Útil para medir objetos, como amostras de tinta, couro e vinil.

VS3-810

Pós, líquidos, pastas e géis



Suporte para instrumentos

Facilita a medição de grânulos, pós, líquidos, pastas e géis sem contaminar o instrumento ou danificar a amostra. Desenvolvido para trabalhar com suportes de amostra substituíveis para maior flexibilidade.

VS3-802

Suportes de amostras para acompanhar o suporte para instrumentos



Kit de colher

- Acomoda uma colher grande (20 ml)
- Acomoda uma colher pequena (2,5 ml)
- Colher grande, colher pequena e nivelador incluídos

FXT-800-002-BK

Acessórios opcionais do kit de colheres



10 pacotes de colheres pretas grandes
(20 ml)

FXT-800-005-BK



10 pacotes de colheres pretas pequenas
(2,5 ml)

FXT-800-006-BK



Nivelador

FXT-800-004



Suporte para placa de Petri (branco)

Acomoda placas de Petri de até 55 mm (2,25") de diâmetro e exatamente 15 mm (0,65") de altura. Placa de Petri não inclusa.

FXT-800-003-WT

Suporte para placa de Petri (preto)

Acomoda placas de Petri de até 55 mm (2,25") de diâmetro e exatamente 15 mm (0,65") de altura. Placa de Petri não inclusa.

FXT-800-003-BK

Suporte personalizado de amostras

Suporte personalizado de amostras desenvolvido para se ajustar às amostras que você precisa medir.

FXT-800-001



FXT-800-003-BK

Somos especialistas em cores

Entendemos que uma excelente apresentação de cores indica uma qualidade excepcional e que suas conquistas dependem da produção confiável e precisa de cores. Sendo que há inúmeras oportunidades para que a cor falhe, é difícil determinar a abordagem correta. É aí que podemos ajudar! Com mais de 60 anos de experiência na fabricação de cores e unidades em todo o mundo, nosso conhecimento abrange uma variedade de setores. Deixe-nos capacitar você a atingir o mais alto nível de precisão de cores para que o seu produto, assim como o produto do seu cliente, se destaque entre a concorrência.

A X-Rite Pantone pode ajudar.

Acesse xrite.com para saber como nossos especialistas em cores podem auditar sua operação e fornecer um relatório gratuito sobre a maturidade das cores.



Soluções completas



Inovação



Serviço



Suporte técnico



Seu parceiro em sustentabilidade

Como parte do nosso compromisso contínuo com a responsabilidade ambiental, continuamos desenvolvendo e aperfeiçoando soluções inovadoras de medição de cores para ajudar nossos clientes a minimizar o desperdício e promover práticas de fabricação sustentáveis.

 **x-rite PANTONE®**

X-Rite é uma marca comercial registrada ou marca comercial da X-Rite, Incorporated nos Estados Unidos e/ou em outros países. PANTONE®, PantoneLIVE e outras marcas comerciais da Pantone são de propriedade da Pantone LLC. Todas as outras marcas comerciais ou marcas registradas pertencem aos respectivos proprietários. © X-Rite, Inc. 2023. Todos os direitos reservados. L10-646-BZ (11/23)